


MANUAL DE USO DEL EQUIPO ONDAS DE CHOQUE



PARTES DEL EQUIPÓ

1. Mango de trabajo
2. Interruptor de manija
3. Pantalla
4. Cabezal de trabajo (se puede reemplazar)
5. Toma de cable de alimentación
6. Cambiar
7. Gato con manija

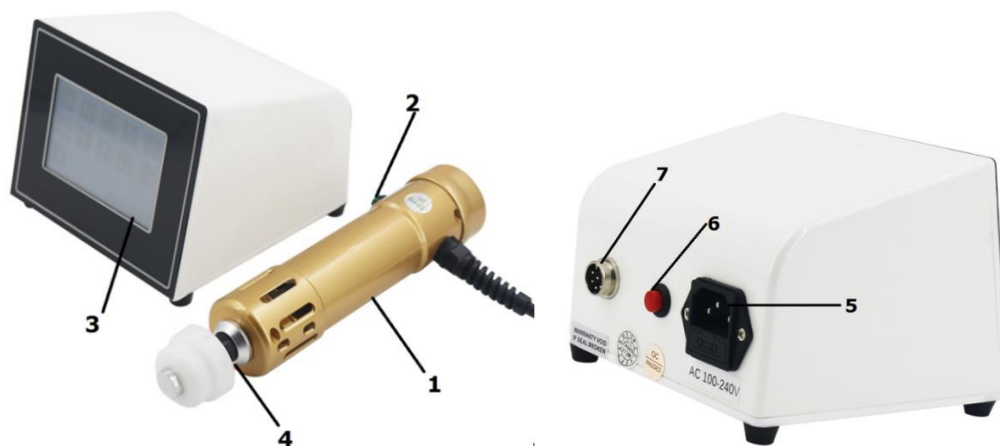

CARACTERÍSTICA:

1. Promueve el metabolismo celular: el instrumento de tratamiento del dolor por ondas de choque es una presión de pulso mecánica administrada a través de un medio que produce ondas de choque balísticas precisas a partir de ondas de sonido de pulso neumáticas. Estimula los puntos de acupuntura, mejora la microcirculación, mejora el flujo sanguíneo y promueve el metabolismo celular.
2. 11 cabezales de masaje: La máquina de tratamiento del dolor tiene 11 cabezales de masaje para diferentes partes del cuerpo para satisfacer sus necesidades. El usuario puede sentir el efecto inicial inmediatamente después del tratamiento físico, el dolor se alivia después de varios tratamientos y el cumplimiento del tratamiento físico es bueno.
3. Reducción del dolor: las máquinas de terapia de ondas de choque están diseñadas para actuar en áreas del cuerpo que se ven afectadas crónicamente por el dolor para tratar el dolor muscular. Trata directamente los puntos dolorosos en la capa fascial, disuelve las adherencias, alivia la fatiga, tiene un efecto analgésico, es un tratamiento no invasivo y es menos dañino para el paciente.
4. Partes adecuadas: la onda de choque actúa en un lugar claro y tiene un impacto mínimo en los tejidos circundantes. Puede tratar una amplia gama de dolores: reducción del dolor en la cabeza, hombros, espalda, manos, brazos, piernas, pies, músculos articulares y terapia de disfunción eréctil.
5. Terapia ED: El tratamiento analgésico para la disfunción eréctil utiliza ondas sonoras pulsadas para abordar eficazmente las causas subyacentes del bajo rendimiento masculino y mejorar eficazmente la función al aumentar el flujo sanguíneo, proporcionando una condición más saludable y duradera, evitando la posibilidad de cirugía y los peligros asociados para el cuerpo sin los efectos de las drogas.

Especificación:

Tipo de artículo: Máquina de terapia de ondas de choque

Material: ABS

Frecuencia: 16 piezas

Equipo de energía: 25 piezas

Tamaño:

Anfitrión: aprox. 14,5x14x12cm/5,7x5,5x4,7 pulgadas

Mango de onda de potencia magnética: aprox. 19x4,5x4,5 cm/7,5x1,8x1.8in

INDICACIONES:

1. Enfermedades del tejido óseo: retraso en la curación de fracturas y discontinuidad ósea, necrosis temprana de la cabeza femoral del adulto.
2. Lesiones crónicas de tejidos blandos: tendinitis de cabeza larga de bíceps, tendinitis del supraespinoso calcificado, epicondilitis humeral, epicondilitis medial humeral, fascitis plantar, tendinitis de Aquiles de punto de parada, etc.

3. Indicaciones relativas: osteoartritis, lesión osteocondral talar, tenosinovitis, bursitis subacromial, bursitis prepatelar, tendinitis rotuliana, mayor bursitis trocantérica, estallido de cadera y mioespasmo, enfermedades de osteonecrosis, etc.

Shockwave tiene los siguientes efectos:

1. Celular: mejora la permeabilidad de la membrana celular aumentando la actividad del canal iónico, promoviendo la división celular y estimulando la producción de citocinas.
2. Vasos sanguíneos en los tendones y músculos: mejora el flujo sanguíneo, aumenta el factor de crecimiento B1 y mejora la mitosis de los osteoblastos.
3. Sistema de óxido de nitrógeno: acelera la remodelación y curación de los huesos.
4. Mejora la microcirculación y el metabolismo
5. Promueve la lisis de fibroblastos CALCIFICADOS.
6. Promueve la síntesis de colágeno.
7. Reduce la tensión del tejido.
8. Tiene efecto analgésico.
9. Tratamiento de la disfunción masculina (ED)

ACCESORIOS

- Las cubiertas azules son adecuadas para cabezales de trabajo: 1#, 2#, 3#, 4#,5#.
- 1#,2# uso para tratamiento y partes curvas como muñecas, codos y rodillas.
- 3#, 4#,5 #uso para áreas de tratamiento grandes en el cuerpo.
- No use gel u otros lubricantes en el tratamiento para evitar que los lubricantes entren en el cabezal de trabajo. Si desea usar gel u otros lubricantes cuando realice el tratamiento, coloque la cubierta azul en el cabezal de trabajo.
- 8# (cabezal en T), 9# (cabezal de presión única), 10# (cabezal en U grande), 11# (cabezal en U pequeña). Se puede utilizar para masajes y quiropráctica.



INTRODUCCIÓN GENERAL

El instrumento de fisioterapia por ondas de choque utiliza energía de ondas de choque electromagnéticas para enfocarse en el cuerpo humano y activar los osteoblastos y las células de los tejidos. Su efecto de cavitación, efecto osteogénico, efecto de activación metabólica y efecto analgésico pueden mejorar la función de absorción de oxígeno de las células sanguíneas locales y acelerar la microcirculación, aflojando así las adherencias de los tejidos, mejorando la circulación sanguínea local y acelerando la recuperación.

La onda de choque está dirigida a las áreas afectadas que son la fuente del dolor crónico. La influencia de la onda de choque provoca la disolución de los depósitos de calcio y conduce a una mejor vascularización. Los efectos secundarios son el alivio del dolor.

SHOCKWAVE TIENE LOS SIGUIENTES EFECTOS:

Celular: Aumento de la transmitancia de la membrana celular mejorando la actividad de los canales iónicos, estimulación de la división celular, estimulación de la producción de citoquinas celulares.

Reproducción de vasos en la zona de tendones y músculos: mejora de la circulación sanguínea, aumento de la concentración del factor de crecimiento beta 1, efecto quimiotáctico y mitogénico sobre los osteoblastos.

Efecto sobre el sistema de óxidos de nitrógeno: Cicatrización y remodelación ósea. Mejora de la macrocirculación y el metabolismo. Disolución de fibroblastos calcificados.

Apoya la producción de colágeno. Reducción de la tensión del tejido. Efecto analgésico.

CÓMO USARLO:

Operación básica:

Seleccione el cabezal de trabajo apropiado.

- Operación de interfaz:
- Haga clic en "Configuración básica" y seleccione el idioma
- Haga clic en la imagen correspondiente a la pantalla que se procesará para ingresar a la interfaz de funciones.
- El sistema incluye 11 partes de operación funcional. Esta aplicación utiliza el uso manual de la terapia de codo como ejemplo. En la interfaz, haga clic en "codo" para entrar en la interfaz.
- En la interfaz "Codo":

(1) "Preselección 500 veces" significa que el sistema se detendrá automáticamente cuando llegue a 500 veces de trabajo. Siga las indicaciones para tocar en cualquier lugar de la pantalla.

(2) "Actual" indica el tiempo de trabajo del proceso de tratamiento actual. Haga clic en "RESET" para borrar los tiempos de procesamiento actuales.

(3) "Frecuencia 1HZ" significa que la frecuencia de funcionamiento predeterminada del sistema es 1HZ, haga clic en ">" o "

(4) "Energía 10mj" significa que la función predeterminada del sistema es 10mj, haga clic en ">" o "

(5) Haga clic en el botón "►", El host está en estado de espera, haga clic en "II" para suspender el trabajo.

(6) Presione el botón en el mango para iniciar o pausar la operación.

Nota: apague el interruptor de encendido del instrumento cuando cambie el cabezal de trabajo o desenchufe cada enchufe.

TRATAMIENTO DE DISFUNCIÓN ERÉCTIL

La frecuencia del tratamiento para la disfunción eréctil es de 1 a 16 HZ. La frecuencia recomendada es de 5-10 HZ. La energía de ED es 0 60 70 90 110 130 150 180 200 MJ,

Ajuste la energía según la sensación del cliente de baja a alta durante la operación.

2. Programas de tratamiento

(1) Dirigido al tejido esponjoso en 5 áreas diferentes


(2) 300 impactos por área, total 1500 impactos en un tratamiento

(3) Dos veces por semana, trate de manera constante durante 3 semanas y luego suspenda durante 3 semanas. Y empezar el próximo curso.

(4) Debería haber más impactos en el extremo superior del pene y menos impactos en la parte inferior del pene.

3. Guía de operación

(1) Elija el cabezal de trabajo de tratamiento exclusivo para la DE de 6# y 7#, a lo largo de las 5 áreas del tejido esponjoso, 300 impactos por área, total 1500 impactos en una ronda, aproximadamente 20 minutos.

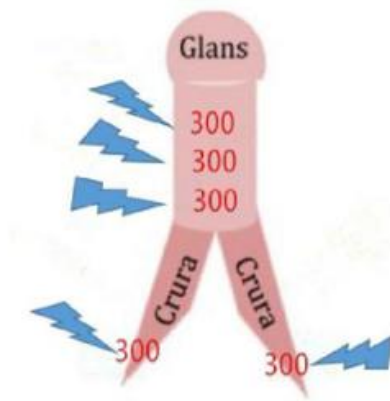

PRÓSTATA

Usar Cabeza #5

1. Limpiar la parte de tratamiento.
2. Según la parte del tratamiento, seleccione la pieza de mango adecuada.
3. Configure la frecuencia adecuada (el rango máximo es 5 HZ-10 HZ) y la energía (el rango máximo es 20 MJ-180 MJ). Para el tratamiento de la disfunción eréctil, el rango de frecuencia es 1-9 HZ y el rango de energía es 20 MJ-180 MJ.
4. Operando en. El esteticista sostiene el cabezal de trabajo con una mano y coloca el mango en el área/punto de tratamiento. El peso del cabezal de trabajo significa que es Normalmente no es necesario aplicar presión en el área/punto de tratamiento.
5. Limpie los restos con una toalla caliente, use una toalla tibia para limpiar el cabezal de trabajo después del tratamiento.

Precauciones:

1. A pesar de la alta amortiguación interna como resultado del peso y el diseño del cabezal de trabajo, las vibraciones continuas pueden causar tensión en la mano del usuario.
2. Para evitar la acumulación de calor en el cabezal de trabajo, es esencial asegurarse de que las salidas de aire en la parte superior y particularmente en la base del cabezal de trabajo no estén bloqueadas por la mano que lo sostiene o cualquier otra cosa.
3. El cabezal del aplicador es pieza fungible y debe reemplazarse después de un cierto período de funcionalidad.

Parámetro de tratamiento

Los pacientes pueden ajustar la energía y la frecuencia según la gravedad de su daño.



NOTA

Contraindicaciones:

1. a ciertos tejidos Aplicable: ojos y áreas circundantes, miocardio, médula espinal, gónadas, riñones e hígado
2. Trastornos sanguíneos, problemas de coagulación o uso de anticoagulantes.
3. En el campo del tratamiento de pólipos.
4. Trombosis.
5. Enfermedades tumorales
6. Polineuropatía
7. Crecimiento del cartílago en los niños
8. Tratamiento con alcoholes lipídicos.
9. No Apto para áreas cerca de grandes haces de nervios, vasos sanguíneos, médula espinal y cabeza.
La potencia máxima del producto no se puede usar continuamente, la fuerza es mayor y la potencia generada es mayor. Se producirá la alarma. de sobrecalentamiento y el apagado automático evitará daños por sobrecalentamiento en el producto.

1.FISIOTERAPIA

- 1.1 Radial y cubital epicondilitis aguda
- 1.2 La tendinitis de los problemas de hombro / hombro, aguda
- 1.3 Calcificada tendinitis del hombro, aguda lesión muscular posterior
- 1.4 Situación, aguda
- 1,5 Tendinitis rotuliana, aguda
- 1.6 Tendinopatía rotuliana aguda
- 1.7 Aquilodinia, aguda
- 1.8 La fascitis plantar, aguda
- 1.9 Espolón calcáneo, aguda
- 1,10 Terapia de puntos gatillo miofasciales por ejemplo Neck, aguda
- 1,11 Miofascial terapia de puntos gatillo por ejemplo, la espalda, el dolor de espalda muscular, aguda
- 1.12 Bursitis trocantérea, aguda
- 1.13 Férulas periostitis / espinilla (Condición después de la sobrecarga), aguda
- 1.14 Enfermedad de Dupuytren, aguda
- 1,15 Pulgar basal artritis / rhizarthritis, articular aguda
- 1.16 Epicondilitis radial y cubital, crónica
- 1,17 Tendinitis pf los problemas de hombro / hombro, crónica
- 1,18 Calcificada tendinitis del hombro, crónica lesión muscular
- 1,19 mensaje de estado, crónica
- 1.20 Tendinitis rotuliana, crónica
- 1.21 Tendinopatía rotuliana, crónica
- 1,22 Aquilodinia, crónica
- 1.23 La fascitis plantar, crónica
- 1,24 Terapia de puntos gatillo miofasciales por ejemplo Neck, crónica
- 1,25 Miofascial terapia de puntos gatillo por ejemplo, la espalda, el dolor de espalda muscular, crónica
- 1.26 Bursitis trocantérea, crónica
- 1,27 férulas periostitis / espinilla (Condición después de la sobrecarga), crónica, 1,28 pulgar basal artritis / rhizarthritis, crónica conjunta.

ESTÉTICA PARA LA CELULITIS

- 2.1 Celulitis blanda, la etapa I
- 2.2 Celulitis mediana, etapa II
- 2.3 Celulitis duro, etapa III
- 2.4 El tejido conectivo / piel de apriete
- 2.5 Las estrías, estrías
- 2.6 Después del tratamiento cryololys
- 2.7 Después del tratamiento de radiofrecuencia
- 2.8 Después del tratamiento ultrasónico

TRATAMIENTOS PARA LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL

- 3.1 Eréctil crónica disfuncional, aguda
- 3.2 Eréctil crónica disfuncional, crónica

FISIOTERAPIA

● INDICACIÓN

1.1 Epicondilitis cubital y radial, aguda

Recomendación de tratamiento

Frecuencia

5-10 Hz

Nivel de potencia

60-90 mJ

Choques por tratamiento

1500-2000

Numero de tratamientos

1-3

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

NOTAS

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y series, finalmente trabajar dinámicamente sobre el área, preferiblemente en la dirección del flujo linfático. Para el punto de tratamiento en el sitio de fijación del tendón: nivel de energía 60 mJ

Para el punto de tratamiento en tendones o músculos:

nivel de energía 60 mJ (90mJ)

● INDICACIÓN

1.2 Tendinitis del hombro / problemas de hombro, aguda Recomendación de tratamiento Frecuencia

5-10 Hz

Nivel de potencia

60-120 mJ

Choques por tratamiento

2000

Numero de tratamientos

1-4

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

NOTAS

Determine el problema con precisión: ¿qué tendón, qué punto de unión se ve afectado? Primero trata estáticamente con

series de hasta 600 choques por punto y series, finalmente trabaje sobre el área de forma dinámica, preferiblemente en el dirección del flujo linfático.

Para el punto de tratamiento en el sitio de inserción del tendón: nivel de energía 60-90 mJ

Para el punto de tratamiento en tendones o músculos:

nivel de energía 120 mJ

● INDICACIÓN

1.3 Tendinitis calcificada del hombro, aguda

Recomendación de tratamiento

Frecuencia

5-10 Hz

Nivel de potencia

90 mJ

Choques por tratamiento

2000

Numero de tratamientos

1-4

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

NOTAS

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y serie, luego trabaje toda el área directamente usando el modo dinámico lento.

● INDICACIÓN

1.4 Estado post lesión muscular, aguda

Recomendación de tratamiento

Frecuencia

5-10 Hz

Nivel de potencia

60-90 mJ

Choques por tratamiento

2000

Numero de tratamientos

3

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

NOTAS

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y serie, luego trabaje toda el área directamente usando el modo dinámico lento.

● INDICACIÓN

1.5 Tendinitis rotuliana aguda Recomendación de tratamiento Frecuencia 5-10 Hz Nivel de potencia 60-90 mJ
Choques por tratamiento 2000 Ltd. Numero de tratamientos 3-4
Frecuencia de tratamiento
1-2 por semana
Aplicador recomendado
15 mm

NOTAS

Determine el problema con precisión: es el tendón, la unión rotuliana superior o las áreas inferiores de la músculo cuádriceps afectado?
Trate la fijación del tendón, el gatillo existente y los puntos de dolor de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y series, luego trabaje el área dinámicamente.
Para el punto de tratamiento en el sitio de inserción del tendón: nivel de energía 60-120 mJ
Para el punto de tratamiento en tendones o músculos: nivel de energía 120 mJ

● INDICACIÓN

1.6 Tendinopatía rotuliana aguda
Recomendación de tratamiento
Frecuencia
5-10 Hz
Nivel de potencia
60-90 mJ
Choques por tratamiento
2000
Numero de tratamientos
1-4
Frecuencia de tratamiento
1-2 por semana
Aplicador recomendado
15 mm, después de la familiarización 6 mm

NOTAS

Preste especial atención a los signos agudos definidos de inflamación. Luego suspenda el tratamiento o reduzca dosis según corresponda.
Generalmente estático pero desde diferentes direcciones hacia la punta de la rótula. Por aplicación, aproximadamente 400 descargas, terminando en el frente.

● INDICACIÓN

1.7 Achillodynia, aguda Recomendación de tratamiento Frecuencia 5-10 Hz
Nivel de potencia 60-90 mJ Choques por tratamiento 2000
Numero de tratamientos 3
Frecuencia de tratamiento 1-2 por semana Aplicador recomendado
15 mm, después de la familiarización 6 mm

NOTAS

Diagnóstico diferencial: ¿se ve afectado el propio tendón o el punto de unión del tendón en el hueso del talón? Hace el
el tendón se mueve libremente o con crepitación o ¿hay nódulos detectables en el tendón? Estáticamente en la inserción del tendón usando el nivel de energía 60-90 mJ. Dinámicamente en el tendón mismo, trabaje estática o

● INDICACIÓN

semiestáticamente en nódulos. No trabaje directamente desde una dirección dorsal sino desde un lado en un ángulo de 45 °. Utilice un nivel de energía de 60 mJ o 90 mJ en este caso.

1.8 Fascitis plantar aguda

Recomendación de tratamiento

Frecuencia

5-10 Hz

Nivel de potencia

60-90 mJ

Choques por tratamiento

2500

Numero de tratamientos

3-4

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

NOTAS

Trabaje con el paciente en una posición prono con el pie apoyado o no apoyado y trabaje toda la aponeurosis dinamicamente.

● INDICACIÓN

1.9 Espuelas en el talón, agudas

Recomendación de tratamiento

Frecuencia

10 Hz

Nivel de potencia

90-120 mJ

Choques por tratamiento

2000

Numero de tratamientos

6 6

Frecuencia de tratamiento

1 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

NOTAS

Aplique directamente al punto de dolor o a calcificación incipiente o manifiesta en el hueso del talón. Trabajar con el paciente en decúbito prono con pie apoyado o no apoyado. Trabajar de forma estática o semiestática.

● INDICACIÓN

1.10 Terapia de puntos gatillo miofasciales, por ejemplo, cuello, agudo
Recomendación de tratamiento Frecuencia
Butst o 5-10 Hz
Nivel de potencia
60 mJ
Choques por tratamiento
1500-2000
Numero de tratamientos
1-4
Frecuencia de tratamiento
1 por semana
Aplicador recomendado
15 mm / 6 mm

NOTAS

Determine el punto de activación y el tono miofascial y priorice. Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y serie. Empezar con el punto de mayor prioridad. Finalmente trabaje sobre toda el área de forma dinámica.

● INDICACIÓN

1.11 Terapia de puntos gatillo miofasciales, por ejemplo, espalda, dolor muscular de espalda, Agudo
Recomendación de tratamiento
Frecuencia
Butst o 5-10 Hz
Nivel de potencia
60 mJ
Choques por tratamiento
1500-2000
Numero de tratamientos
1-4
Frecuencia de tratamiento
1 por semana
Aplicador recomendado
15 mm, después de la familiarización 6 mm

NOTAS

Determine el punto de activación y el tono miofascial y priorice. Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y serie. Empezar con el punto de mayor prioridad. Finalmente trabaje sobre toda el área de forma dinámica.

● INDICACIÓN

1.12 Bursitis trocantérea aguda Recomendación de tratamiento Frecuencia 5-10 Hz Medical Device Co., Ltd. Nivel de potencia 60-90 mJ Choques por tratamiento 2000

Numero de tratamientos

1-4

Frecuencia de tratamiento

1 por semana

Aplicador recomendado

15 mm **NOTAS**

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y serie, luego

trabaje toda el área directamente usando el modo dinámico lento. Acérquese al área de tratamiento más bien desde el lado en un ángulo de 45 y no aplique directamente desde la dirección lateral en el trocánter o tracto iliotibial.

● INDICACIÓN

1.13 Periostitis / férulas de espinilla (condición después de sobrecarga), aguda Recomendación de tratamiento

Frecuencia

Ráfaga o 5 Hz

Nivel de potencia

60 mJ

Choques por tratamiento

1000

Numero de tratamientos

3

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm

NOTAS

Tratamiento dinámico cuidadoso en todo el sitio de inserción del tendón afectado en la columna tibial anterior. Siga el geometría ósea y no tratar directamente en la columna tibial. Si es necesario, incluya el músculo tibial anterior en el tratamiento.

● INDICACIÓN

1.14 Enfermedad de Dupuytren aguda

Recomendación de tratamiento

Frecuencia

10 Hz

Nivel de potencia

90 mJ

Choques por tratamiento

200-300 *

Numero de tratamientos

5 5

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana

Aplicador recomendado

6 mm

- INDICACIÓN

NOTAS

Estática directamente en el sitio del problema, y en caso de problemas de tolerancia, aplique la serie semiestáticamente desde direcciones diferentes . Apoye o fije la articulación con dos dedos desde los lados izquierdo y derecho durante el tratamiento

* Adhiérase a los períodos de descanso (después de cada 25 descargas) y observe la reacción del paciente.

● INDICACIÓN

● INDICACIÓN

1.15 Artritis articular basal del pulgar / rizartritis aguda Recomendación de tratamiento Frecuencia
5-10 Hz
Nivel de potencia
60-90 mJ
Choques por tratamiento
1500 *
Numero de tratamientos
3
Frecuencia de tratamiento
1-2 por semana
Aplicador recomendado
15 mm

NOTAS

Estática directamente en el sitio del problema, y en caso de problemas de tolerancia, aplique la serie semiestáticamente desde direcciones diferentes . Apoye o fije la articulación con dos dedos desde los lados izquierdo y derecho durante el tratamiento

* Adhiérase a los períodos de descanso (después de cada 200 descargas) y observe la reacción del paciente.

● INDICACIÓN

1.16 Epicondilitis cubital y radial, crónica
Recomendación de tratamiento
Frecuencia
10-16 Hz
Nivel de potencia
120 mJ
Choques por tratamiento
2000-3000
Numero de tratamientos
4-8
Frecuencia de tratamiento
2 por semana
Aplicador recomendado
15 mm, después de la familiarización 6 mm

NOTAS

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y series, finalmente trabajar dinámicamente sobre el área, preferiblemente en la dirección del flujo linfático. Shenzhen Oceanus Medical Device Co., Ltd.

Para el punto de tratamiento en el sitio de fijación del tendón: nivel de energía 60 mJ

Para el punto de tratamiento en tendones o músculos: nivel de energía 60 mJ (90mJ)

1.17 Tendinitis de los problemas de hombro / hombro, crónica Recomendación de tratamiento Frecuencia
10-16 Hz

Nivel de potencia

120 mJ

Choques por tratamiento

3000

Numero de tratamientos hasta

las 9

Frecuencia de tratamiento

2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

NOTAS

Determine el problema con precisión: ¿qué tendón, qué punto de unión se ve afectado? Primero trata estáticamente con

series de hasta 600 choques por punto y series, finalmente trabaje sobre el área de forma dinámica, preferiblemente en el dirección del flujo linfático.

Para el punto de tratamiento en el sitio de inserción del tendón: nivel de energía 60-120 mJ

Para el punto de tratamiento en tendones o músculos: nivel de energía 120 mJ

● INDICACIÓN

1.18 Tendinitis calcificada del hombro, crónica

Recomendación de tratamiento

Frecuencia

10-16 Hz

Nivel de potencia

120 mJ

Choques por tratamiento

2000-2500

Numero de tratamientos hasta

las 9

Frecuencia de tratamiento

2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

NOTAS

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y serie, luego trabajar toda el área directamente usando el modo dinámico lento
., Ltd.

● INDICACIÓN

● INDICACIÓN

1.19 Estado post lesión muscular, crónica Recomendación de tratamiento Frecuencia
10-16 Hz
Nivel de potencia
120 mJ
Choques por tratamiento
2000-3000
Numero de tratamientos
1-6
Frecuencia de tratamiento
2 por semana
Aplicador recomendado
15 mm, después de la familiarización 6 mm

NOTAS

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y serie, luego trabaje toda el área directamente usando el modo dinámico lento.

● INDICACIÓN

1.20 Tendinitis rotuliana, crónica
Recomendación de tratamiento
Frecuencia
10-16 Hz
Nivel de potencia
120 mJ
Choques por tratamiento
2000-3000
Numero de tratamientos
1-6
Frecuencia de tratamiento
2 por semana
Aplicador recomendado
15 mm

NOTAS

Determine el problema con precisión: es el tendón, la unión rotuliana superior o las áreas inferiores de la músculo cuádriceps afectado?

Trate la fijación del tendón, el gatillo existente y los puntos de dolor de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y series, luego trabaje el área dinámicamente.

Para el punto de tratamiento en el sitio de inserción del tendón: nivel de energía 90-120 mJ

Para el punto de tratamiento en tendones o músculos: nivel de energía 120 mJ

1.21 Tendinopatía rotuliana, crónica Recomendación de tratamiento Frecuencia 10-16 Hz
Nivel de potencia 120 mJ
Choques por tratamiento 2000-2500
Numero de tratamientos hasta las 10 Frecuencia de tratamiento 2 por semana
Aplicador recomendado
15 mm, después de la familiarización 6 mm

NOTAS

Presta especial atención a los signos agudos definidos de inflamación. Luego, suspenda el tratamiento o reduzca el dosis según sea apropiado. Generalmente estático pero desde diferentes direcciones hacia la punta de la rótula. Por aplicación alrededor de 400 choques, terminando en el frente.

● INDICACIÓN

1.22 Achillodynia, crónica
Recomendación de tratamiento
Frecuencia
10-16 Hz
Nivel de potencia
120 mJ
Choques por tratamiento
2000-3000
Numero de tratamientos
1-6
Frecuencia de tratamiento
2 por semana
Aplicador recomendado
15 mm, después de la familiarización 6 mm

NOTAS

Diagnóstico diferencial: ¿se ve afectado el propio tendón o el punto de unión del tendón en el hueso del talón? Hace el el tendón se mueve libremente o con crepitación o ¿hay nódulos detectables en el tendón? Estáticamente en la inserción del tendón usando el nivel de energía: 60-90 mJ. Dinámicamente en el tendón mismo, trabaje estática o semiestáticamente en nódulos. No trabaje directamente desde una dirección dorsal sino desde un lado en un ángulo de 45 grados. Usa energía nivel 60 mJ o 90 mJ en este caso.

● INDICACIÓN

1.23 Fascitis plantar crónica

Recomendación de tratamiento

Frecuencia

5-10 Hz

Nivel de potencia

60-90 mJ

Choques por tratamiento

1500-3000

Numero de tratamientos

1-7

Frecuencia de tratamiento

2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

NOTAS

Trabaje con el paciente en una posición prono con el pie apoyado o no apoyado y trabaje toda la aponeurosis dinámicamente

● INDICACIÓN

1.24 Terapia de puntos gatillo miofasciales, por ejemplo, cuello, crónica Recomendación de tratamiento Frecuencia

Ráfaga o 5-10 Hz

Nivel de potencia

60 mJ

Choques por tratamiento

1500-3000

Numero de tratamientos

6 6

Frecuencia de tratamiento

1 por semana

Aplicador recomendado

15 mm / 6 mm

NOTAS

Determine el punto de activación y el tono miofascial y priorice. Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y serie.

Comience con el punto de mayor prioridad.

Finalmente trabaje sobre toda el área de forma dinámica.

● INDICACIÓN

1.25 Terapia de puntos gatillo miofasciales, por ejemplo, espalda, dolor muscular de espalda, crónica

Recomendación de tratamiento

Frecuencia

Ráfaga o 5-10 Hz

Nivel de potencia

60 mJ

Choques por tratamiento

1500-2000

Numero de tratamientos

6-6

Frecuencia de tratamiento

1 por semana

Aplicador recomendado

15 mm, después de la familiarización 6 mm

NOTAS

Determine el punto de activación y el tono miofascial y priorice. Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y serie.

Comience con el punto de mayor prioridad.

Finalmente trabaje sobre toda el área de forma dinámica.

● INDICACIÓN

1.26 Bursitis trocantérea crónica

Recomendación de tratamiento

Frecuencia

Ráfaga o 5-10 Hz

Nivel de potencia

120 mJ

Choques por tratamiento

2000

Numero de tratamientos

6-8

Frecuencia de tratamiento

1 por semana

Aplicador recomendado

15 mm

NOTAS

Primero trate los puntos gatillo y dolor existentes de forma estática con series de hasta 600 descargas por punto y serie, luego

● INDICACIÓN

trabaje toda el área directamente usando el modo dinámico lento. \ n \ nAcercarse al área de tratamiento en lugar de un lado en un ángulo de 45 grados y no aplique directamente desde la dirección lateral en el trocánter o el tracto iliotibial.

1.27 Periostitis / férulas de espinilla (condición después de sobrecarga), crónica Recomendación de tratamiento

Frecuencia

Ráfaga o 5-10 Hz

Nivel de potencia

60-90 mJ

Choques por tratamiento

2000

Numero de tratamientos

4-8

Frecuencia de tratamiento

2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm

NOTAS

Tratamiento dinámico cuidadoso en todo el sitio de inserción del tendón afectado en la columna tibial anterior. Siga el geometría ósea y no tratar directamente en la columna tibial. Si es necesario, incluya el músculo tibial anterior en el tratamiento.

● INDICACIÓN

1.28 Artritis articular basal del pulgar / rizartritis crónica Recomendación de tratamiento Frecuencia

5-10 Hz

Nivel de potencia

90 mJ

Choques por tratamiento

2000 *

Numero de tratamientos

4-8

Frecuencia de tratamiento

2 por semana

Aplicador recomendado

15 mm

NOTAS

Estática directamente en el sitio del problema, y en caso de problemas de tolerancia, aplique la serie semiestáticamente desde diferentes direcciones. Apoye o fije la articulación con dos dedos desde los lados izquierdo y derecho durante el tratamiento.

● INDICACIÓN

* Adhiérase a los períodos de descanso (después de cada 200 descargas) y observe la reacción del paciente. 2
Tratamientos para la celulitis

2.1 Celulitis blanda, etapa I

Recomendación de tratamiento

Frecuencia

14-16 Hz

Nivel de potencia

60-120mJ

Vacunas por tratamiento 2500-3000

Numero de tratamientos

8-10

Frecuencia de tratamiento

2-3 por semana

Cabeza de aplicación recomendada

25 mm

NOTAS

Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga lento y regular movimientos Es posible usar una crema especial para celulitis con ingredientes activos. Estos ingredientes serán penetrar y ayudará adicionalmente.

● INDICACIÓN

2.2 Celulitis media, etapa II

Recomendación de tratamiento

Frecuencia

10-16 Hz

Nivel de potencia

90-120mJ

Vacunas por tratamiento 2500-3400

Numero de tratamientos

9-12

Frecuencia de tratamiento

2-3 por semana

Cabeza de aplicación recomendada

25mm

NOTAS

● INDICACIÓN

Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga lento y regular movimientos Es posible usar una crema especial para celulitis con ingredientes activos. Estos ingredientes serán penetrar y ayudará adicionalmente. En una celulitis dolorosa mantener la frecuencia primero baja y aumentarla lentamente en la próxima sesión.

2.3 Celulitis dura, etapa III

Recomendación de tratamiento

Frecuencia

10-16 Hz

Nivel de potencia

90-120mJ

Vacunas por tratamiento 3200-3700

Numero de tratamientos

10-14

Frecuencia de tratamiento

2-3 por semana

Cabeza de aplicación recomendada

25mm

NOTAS

Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga lento y regular movimientos Es posible usar una crema especial para celulitis con ingredientes activos. Estos ingredientes serán penetrar y ayudará adicionalmente. En una celulitis dolorosa mantener la frecuencia primero baja y aumentarla lentamente en la próxima sesión.

● INDICACIÓN

2.4 Tejido conectivo / estiramiento de la piel

Recomendación de tratamiento

Frecuencia

10-16 Hz

Nivel de potencia

90-120mJ

Vacunas por tratamiento 1500-2500

Numero de tratamientos

8-12

Frecuencia de tratamiento

2-3 por semana

Cabeza de aplicación recomendada

25mm

- INDICACIÓN

NOTAS

Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga lento y regular movimientos Es posible usar una crema de ajuste especial con ingredientes activos. Estos ingredientes serán penetrar y ayudará adicionalmente.

Dependiendo del área tratada y del tamaño del área, es necesario ajustar la configuración.

● INDICACIÓN

2.5 estrías, estrías

Recomendación de tratamiento

Frecuencia

12-16 Hz

Nivel de potencia

90-120 mJ

Vacunas por tratamiento 1500-2500

Numero de tratamientos

10-12

Frecuencia de tratamiento

2-3 por semana

Cabeza de aplicación recomendada

25mm

NOTAS

Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga lento y regular movimientos. Es posible usar una crema especial de estrías con ingredientes activos. Estos ingredientes penetrarán y te ayudará adicionalmente. No solo trate las estrías seleccionadas, sino que también trate el tejido sano cercano. Esta evita la forma de nuevas estrías.

● INDICACIÓN

2.6 Después del tratamiento con criolipolisis

Recomendación de tratamiento

Frecuencia

12-16 Hz

Nivel de potencia

90-120mJ

Vacunas por tratamiento 2000-2500

Numero de tratamientos

4-8

Frecuencia de tratamiento

1 por semana

Cabeza de aplicación recomendada

25mm

NOTAS

Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga lento y regular movimientos. Los mejores resultados ocurren si trata al cliente inmediatamente después del tratamiento con Cryolipolyse. Después semanal. Después de cuatro semanas, el cliente puede decidir hacer crio en combinación con Celluliwave nuevamente en el área tratada o no.

Oceanus Medical Device Co., Ltd.

● INDICACIÓN

2.7 Después del tratamiento de radiofrecuencia

Recomendación de tratamiento

Frecuencia

10-14 Hz

Nivel de potencia

90-120 mJ

Vacunas por tratamiento 2000-2500

Numero de tratamientos

10-14

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana, dependiendo del dispositivo rf

Cabeza de aplicación recomendada

25mm

NOTAS

Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga lento y regular movimientos Los estudios clínicos mostraron mejores resultados con Celluliwave después de calentar el tejido (frecuencia de radio). Realice primero el tratamiento de radiofrecuencia y luego la terapia de ondas de choque.

Dependiendo de

Dispositivo de radio, es posible hacer hasta 2 tratamientos a la semana.

● INDICACIÓN

2.8 Después del tratamiento ultrasónico

Recomendación de tratamiento

Frecuencia

10-14 Hz

Nivel de potencia

90-120mJ

Vacunas por tratamiento 2000-2500

Numero de tratamientos

8-10

Frecuencia de tratamiento

1-2 por semana, dependiendo del dispositivo sónico

Cabeza de aplicación recomendada

25mm

NOTAS

Use la pieza de mano verticalmente sin presión adicional sobre el área tratada. Por favor haga lento y regular movimientos Los ingredientes penetrados con ultrasonidos serán más efectivos después de la terapia con Celluliwave. Los resultados son mejores y más profundos.

Tratamientos para Disfunción Eréctil ED

- INDICACIÓN

3.1 Disfuncional eréctil crónico, agudo

Recomendación de tratamiento

Frecuencia

5-10 Hz

Energía 0-90 mJ

Choques por tratamiento

300 descargas por sitio, 5 sitios Número de tratamientos

12 sesiones

Total de 18,000 descargas por paciente

NOTAS

7 semanas de tratamiento intermitente:

Semana 1-2, una vez cada dos días y tres veces por semana 3-5, sin tratamiento Semana 6-7, una vez cada dos días y tres veces por semana

- INDICACIÓN

3.2 Eréctil disfuncional crónico, crónico

Recomendación de tratamiento

Frecuencia

5-10 Hz

Energía 0-60 mJ

Choques por tratamiento

300 descargas por sitio, 5 sitios Número de tratamientos

12 sesiones

Total de 18,000 descargas por paciente

Notas

7 semanas de tratamiento intermitente:

Semana 1-2, una vez cada dos días y tres veces por semana 3-5, sin tratamiento Semana 6-7, una vez cada dos días y tres veces por semana.